

## Fiche technique




### Informations

|             |                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation | Siège de douche escamotable, 380 x 355 x 500 mm, Assise Polypropylène Taupe & Pieds Aluminium Epoxy Gris, Ø 25 mm |
| Référence   | 134720                                                                                                            |

### Les + produit

- + Sécurité maximale grâce à la béquille automatique.
- + Peu encombrant en position relevée.
- + Facilité d'installation.
- + Garantie anticorrosion.

### Description

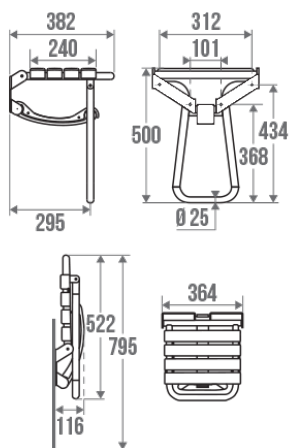

Assise standard. 4 lattes polypropylène taupe.  
Tube aluminium époxy gris.  
Permet de prendre une douche en position.

### Caractéristiques techniques

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Matière                | Polypropylène & Aluminium |
| Finition               | Epoxy                     |
| Couleur                | Taupe & Gris              |
| Diamètre Ø             | 25 mm                     |
| Poids brut             | 2.600 kg                  |
| Poids Net              | 2.170 kg                  |
| Conditionnement        | Boîte imprimée            |
| CE : charge admissible | 150 kg                    |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Tests laboratoire à | 225 kg                           |
| Garantie            | 5 ans                            |
| Gencod              | 3111561347200                    |
| Code douanier       | 7615200000                       |
| Notice              | <a href="#">A13470022_IND_17</a> |

## Conseils de pose et entretien

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

## Entretien

**IMPORTANT :** Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

## Confort d'usage

### Fonction

Repos 

### Caractéristiques

Horizontal 

Vertical 

Anticorrosion 

### Type d'utilisation

Douche 

Vestiaire/Cabine 

### Lieux d'utilisation

Ets médicaux 

ERP/IOP 

Hôtels 

Habitats privés 

Lieux de travail 